

Cosa fare se cade il conformatore ?

Si tratta di una semi-urgenza !

Bisogna riposizionare il conformatore al più presto.

Per rimettere il conformatore, riprendere al punto 5.



In caso di bisogno contattare la policlinica al numero:

+41 21 626 83 03

Senza conformatore, la cavità orbitaria dietro le palpebre si restringe e rischia di non contenere più la futura protesi estetica.

Dopo l'operazione, i tessuti orbitali si sgonfiano. Se il conformatore cade ripetutamente, potrebbe essere necessario sostituirlo con uno più grande.

Per i
professionisti

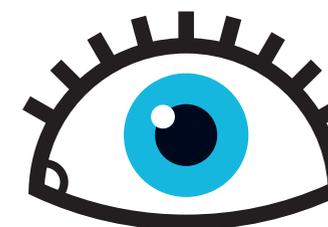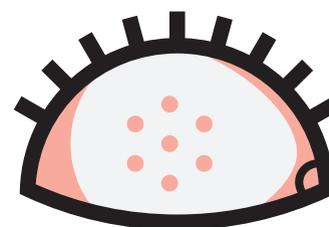

Come manipolare un conformatore



**Hôpital ophtalmique
Jules-Gonin**

Service universitaire d'ophtalmologie
Fondation Asile des aveugles

Avenue de France 15 • cp 5143 • 1002 Lausanne
Tél. +41 21 626 81 11 • www.ophtalmique.ch


La rimozione del conformatore

Sole se


1. Lavarsi le mani.




2. Pulire le palpebre con soluzione fisiologica (NaCl 0.9%) ed una garza al fine di rimuovere le secrezioni ed eventuali tracce di sangue.

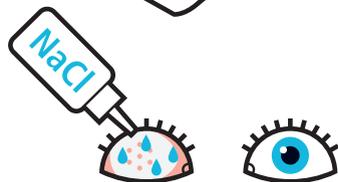


3. Tirare in basso la palpebra inferiore per liberare il conformatore.

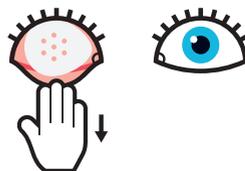

4. Passare la palpebra inferiore sotto al conformatore per poterlo rimuovere.

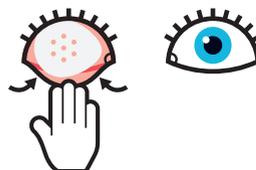


5. Mentre si lava la cavità, posizionare il conformatore su una garza.

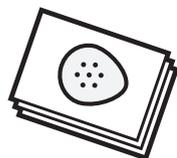

Le cure infermieristiche della cavità

6. Risciacquare abbondantemente la cavità con l'NaCl 0.9%.

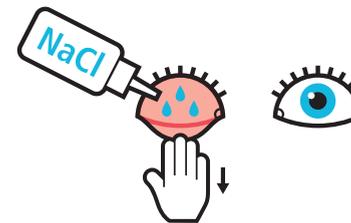


7. Lavare il conformatore con del sapone liquido e risciacquare.


8. Spruzzare il conformatore di NaCl 0.9%. Utilizzare una garza umida per pulirlo senza mai asciugarlo.



9. Riposizionare il conformatore inserendolo inizialmente sotto la palpebra superiore. *N.B : lato largo : temporale; lato stretto : nasale.*

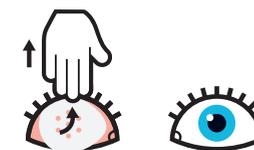

10. Spostare la palpebra inferiore al di sopra del conformatore.

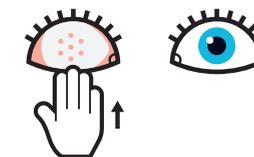

11. Applicare il trattamento prescritto dal medico attraverso i piccoli fori del conformatore.

